








Ortodontilised ankurimplantaadid



Keskmise kraega

	5 mm	7 mm	9 mm	11 mm
Ø 1.3		 109.487	 109.488	 109.489
Ø 1.6	 109.702	 109.496	 109.497	 109.498

:: Klass 5 Titaan;
:: Iseperforeeruv

::
:: Krae kõrgus;
- madal: 0mm;
- kõrge: 1 mm;

:: Pöördemoment kuni 10 Ncm (0.13mm)
and 20 Ncm (0.16mm)

:: Puurimiskiirus 200 rpm;
:: Paigaldamiskiirus 30 rpm;

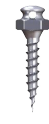
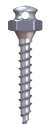
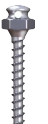

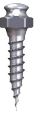
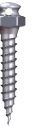

Puurid ortodontilistele ankrutele

:: Soovitav kasutada luu tüübiga I ja II
:: Puuridel on implantaadi pikkuse märgistus
(5, 7, 9 ja 11mm)

	Ø 1.1 mm	Ø 1.3 mm	Ø 1.6 mm
Sirgotsik	103.042	103.078	103.043
Nurkotsik	103.044	103.079	103.045



Madala kraega

	5 mm	7 mm	9 mm	11 mm
Ø 1.3		 109.484	 109.485	 109.486
Ø 1.6	 109.701	 109.493	 109.494	 109.495

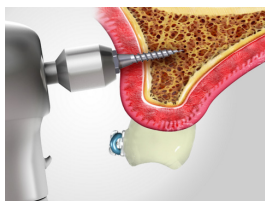
Kortikaalluu augustaja

103.207

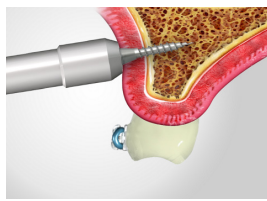


Adapterühendused ortodontilistele ankrutele

Lühike	Pikk	Rachetile
105.040	105.039	105.025



Implantaadi paigaldamine nurkotsikühendusega (105.039 pikk või 105.040 lühike).



Käsitsi paigaldamiseks on võimalik kasutada implantaadi viijat (104.033) või racheti ühendust koos nurkotsiku adapteriga (105.025).

Ankurimplantaadi viija, manuaalne

104.033



Hinnakiri

TOOTE KIRJELDUS	HIND
Ortodontiline ankurimplantaat (madala ja keskmise kraega)	19.00€
Puur ortodontilisele ankurimplantaadile (sirg- ja nurkotsik)	18.00€
Kortikaalluu augustaja	29.00€
Nurkotsiku adapterühendus ortodontilisele ankrule	29.00€
Racheti ühendus nurkotsiku adapterile	19.00€
Ankurimplantaadi viija, manuaalne	39.00€



MED GRUPE OÜ



Pärnu mnt. 139C-5, Tallinn



Tel. nr. +372 5669 5443



E-mail: info@medgrupe.ee



www.medgrupe.ee